

# CHOUCHOU

—チョウチョウ—



株式会社CHOUCHOU  
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央1-11-1  
千葉中央ツインビル1号館 1F  
Tel:043-227-8885  
お問い合わせ先: info@chouohc.jp

# CHOUCHOU

—チョウチョウ—



# THE MORPHO — ザ・モルフォ —

毎朝5分で完了する、  
サロンクオリティの美肌ケア。  
ザ・モルフォを使って、  
ハリと輝きのある若々しい印象の肌へ。  
ザ・モルフォ専用の  
スキンケア製品と一緒にお使いいただくと、  
より効率的にエイジングケア\*効果が得られます。

※年齢に応じたケア


## 5つのパワフルなスキンケア機能

-  **MFIP** 中周波断続パルス\*
-  **ULTRA PULSE** ウльтраパルス\*
-  **RF** 高周波
-  **EMS** 表情筋ケア
-  **LED** 光ケア

## Our Results 臨床試験で証明された効果

チョウチョウは、世界有数の効能評価機関であるSGSと共同で臨床試験を実施し、  
30名の女性被験者（30～55歳）に、28日間毎朝5分間の美容習慣を実践してもらいました。

Skin Results 検証結果

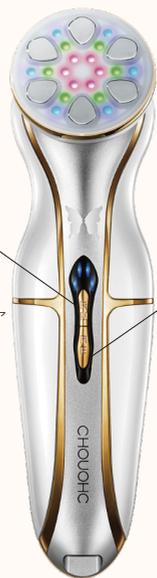

User Satisfaction 満足度

## Your weekly beauty ritual

RMモード：週1回のウィークリーケア  
[週1日、朝のメイク前に]



週1回の集中保湿フェイシャルケアで、  
毎日のスキンケア効果を最大限に引き出すことができます。  
RMモードは、RF、MFIP/UP、LEDの  
4つの先端スキンケア技術を組み合わせることで、  
肌の引き締めとハリアップ、乾燥などをはじめとした  
エイジングサインのケア、水分量アップと乾燥の予防をサポートします。


### ご使用方法

まず、デバイスの先端にモルフォセラムを2プッシュします。  
その後デバイスの電源を入れ、肌に密着させます。  
あごの下から、フェイスラインに沿って耳の後ろまで  
徐々にデバイスを移動させます。  
その後、首の横の筋肉を通して鎖骨のあたりまで下げます。

次に、下の3つのラインをなぞります

- あごから耳まで
- 唇の端から耳まで
- 鼻のわきからこめかみまで

眉毛から髪の毛の生え際に向かってデバイスを移動させます。  
同じことを顔の反対側で繰り返します。

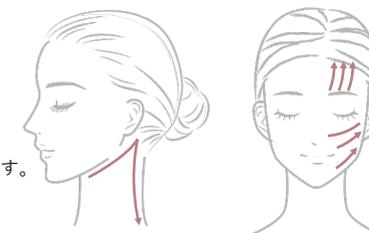

## Your daily facial workout

REモード：毎日のデイリーケア  
[週6日、朝のメイク前に]



RF、EMS、LEDの機能を組み合わせたREモードは、  
肌のコンディションを整えると同時に、エイジングケア\*も徹底、  
明るく若々しい印象の肌へ導きます。  
※年齢に応じたケア


### ご使用方法

まずデバイスの先端にモルフォジェルを2プッシュします。  
その後デバイスの電源を入れ、肌に密着させます。  
およそ3秒ずつあて、以下の手順でケアを行ってください。  
あごの下から、フェイスラインに沿って  
耳の後ろまで徐々にデバイスを移動させます。  
その後、首の横の筋肉を通して鎖骨のあたりまで下げます。

次に、下の3つのラインをなぞります

- あごから耳まで
- 唇の端から耳まで
- 鼻のわきからこめかみまで

眉毛から髪の毛の生え際に向かってデバイスを移動させます。  
同じことを顔の反対側で繰り返します。

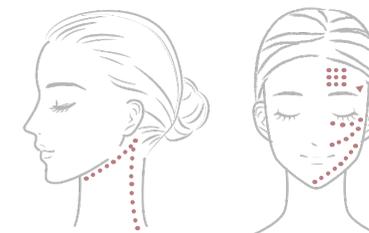

※ケアを行う部位に美顔器を密着させてください。密着できていない場合、正しく出力されません。

モルフォデバイスとの併用に特化して開発されたスキンケア処方です。一緒にお使いいただくことで、肌のコンディションを整え、毎朝の美容習慣から得られる効果を最大限に引き出します。



**MORPHO BOOSTER**  
モルフォブースター

ザ・モルフォのケア前にご使用いただくことで、肌の表面をやわらかくし、潤いを与えます。



**MORPHO GEL**  
モルフォジェル(RE)[デイリーケア]

肌を保湿し、ハリと弾力のある美しい肌に仕上げます。毎日のデイリーケア（REモード）でご使用ください。



**MORPHO SERUM**  
モルフォセラム(RM)[ウィークリーケア]

保湿成分の高い成分を高濃度に配合し、日々の乾燥を防ぎしなやかな肌を保ちます。週一回のウィークリーケア(RMモード)でご使用ください。



**MORPHO MASK**  
モルフォマスク

高濃度の保湿成分と有用成分を染み込ませたバイセルロース製のマスク。角質層のすみずみまで美容成分を届けます。



モルフォのスキンケアには、ローヤルゼリー、天然ハチミツ、オウゴン根エキスなど、質の高い植物由来成分を使用しています。

モルフォスキンケア製品は、アルコール、合成香料、合成着色料、合成酸化防止剤、鉱物油、石油系界面活性剤、紫外線吸収剤を一切含有していません。



**天然ハチミツ**

[保湿] 天然の保湿成分であるハチミツは、角層のすみずみまで水分を取り込んで維持、カサつきの目立たないみずみずしい肌へ  
[肌荒れ予防] 整肌作用があり、肌荒れを防ぐ効果  
[くすみの予防、トーンアップ] 古い角質をやさしく取り除きながら、明るい肌へ  
\*「古い角質による」



**ローヤルゼリー**

[保湿] コラーゲンをサポートし、ハリを与える  
[保湿効果・ハリ感アップ] 適度な脂質が、肌に潤いを与え、もちりと弾力のある肌へ  
[皮膚のくすみ予防] 古い角質によるくすみを防ぎます



**ルイポスエキス**

[整肌作用] 肌のコンディションを整えます  
[肌荒れを防ぐ] 垂鉛が、肌の理想的な状態を維持  
[保湿] 必要な潤いを運ぶのを助け、ツヤのある肌へ導く



**サンザシエキス**

[肌荒れに優しく働きかける] サンザシエキスは敏感肌に適した成分で、肌荒れをしっかりと防ぎます。  
[潤いを与え、肌のコンディションを整える] 肌のヒアルロン酸量を保つことで、潤いのある若々しい印象の肌を維持することができます成分です。



**コラーゲン**

[保湿効果] 水分を保持する作用で、乾燥を防ぐ  
[肌にハリを与える] 肌に水分を与える働きで、肌にハリを与える  
[肌を柔らかくする] よりなめらかな肌に



**ヒアルロン酸**

[保湿成分] 角質層のすみずみまでうるおいを与え、キメを整える  
[肌のバリア機能をサポート] 肌のバリアとして、うるおいを維持、肌の乾燥を防ぐ  
[肌を引き締め、ハリを与える] 肌を潤しハリを与え、若々しい印象の肌へ



**セイヨウオオバコ種子エキス**

[肌荒れの予防] 整肌作用があり、肌荒れを予防  
[肌を明るくする] 古い角質を取り除き、肌に透明感を与えます。



**オウゴン根エキス**

[乾燥によるくすみ] 何百年も前から知られている和漢の成分で、乾燥によるくすみに効果的  
[整肌作用] 紫外線や乾燥による肌のダメージを防ぐ成分



**グリチルリチン酸2K**

[肌のコンディショニング] リコリスの根から抽出された植物由来の天然成分が、肌のコンディションを整えます。  
[潤いを与え、肌のコンディションを整える] 肌のヒアルロン酸量を保つことで、潤いのある若々しい印象の肌を維持することができます成分です。



**エラスチン**

[肌の弾力アップ] 肌にハリを与え、引き締める  
[ハリを与える] エラスチンが肌の弾力性を高め、キメの乱れが目立たない健康的で艶やかな肌へ

# CHOUCHOU

—チョウチョウ—

毎朝5分で「エステ素肌」の実現

## 美肌ジム

肌の土台から整える



# THE MORPHO CARVER

— ザ・モルフォ カーバー —

朝と夜、5分のケアで若々しい目元へ



CMP  
スキンケア成分  
浸透サポート

EMP  
目周辺の筋肉  
を刺激

中高周波  
目元  
リフレッシュ

ハリ  
アップ

赤色LED  
肌引き締め

## モード選択



### ☀️ Daily モード CMP

D ボタンを長押しすることで、CMP が起動します。



### 🌙 Daily モード EMP

CMP の状態から D ボタンを長押しすることで、EMP に切り替わります。



### 📅 Weekly モード

W ボタンを長押しすることで、weekly モードが起動します。レベルは3段階あります。W ボタンを押すことで、出力レベルを選択できます。

•W か D ボタンを長押しして電源 OFF

3つのモードに

5つのパワフルなスキンケア機能を凝縮

チョウチョウを使って、理想的な3Dエイジングケアソリューションを。※「年齢に応じたケア」  
ザ・モルフォ カーバーは、肌的確な刺激を与える設計と、3Dフェイスクア技術により、毎朝わずか5分間の使用で若々しいハリを取り戻すお手伝いをします。

ザ・モルフォ カーバーは、朝使用することでスキンケア成分の吸収をサポートすることができます。また、その光と熱エネルギー技術により、目元のなどのしわを目立ちにくくさせる、さらに、肌の再生能力を高め肌にみずみずしさをもたらすと期待できます。



### 【毎朝5分】 Dailyモード CMP ハリアップモード

モルフォアイジェルと一緒に使用します。インサートパルス・EMS・中・高周波が同時に出力されることで、ハリアップ効果とモイスチャー効果が期待でき、メイクのノリを良くし、目元のメイクのヨレやダマを防ぎます。

### 【毎晩5分】 Dailyモード EMP アイジムモード

モルフォアイジェルと一緒に使用します。筋肉を動かすことに特化したパルスが出力され、目元の筋肉を動かし顔の筋肉に働きかけることができます。効果を最大限に実感していただくために、夜の使用をお勧めしています。



### 【週1回5分】 Weeklyモード エイジングケア※モード ※「年齢に応じたケア」

モルフォアイセラムと一緒に使用します。TP※2とCMP※3が交互に出力されることで、アイセラムの有用成分を表皮の角層のすみずみまで浸透させます。また、エステティシャンが行うタッピングや繰り返し筋肉を持ち上げるような動きを再現することで、肌にハリを与えます。

※1年齢に応じたケア ※2 TP=CMPが断続的に出力されます  
※3 CMP=インサートパルス・EMS・中・高周波が同時に出力されます



## Daily Care

**【毎朝5分】** CMP ハリアップ  
モード

**【毎晩5分】** EMP アイジム  
モード



## Weekly Care

**【週1回5分】**  
WEEKLY  
①エイジングケア※

※「年齢に応じたケア」

専用のスキンケア製品の使用により、ザ・モルフォカバーのフォトリック技術の効果を高め、さらに効率的にスキンケアを行うことができます。



### モルフォ アイジェル 30 ml

主要成分※2：トリプルセラミド、トリプルコラーゲン、  
SYN®-AKE※3、ビタミンEなど。

使用方法：CMPとEMPモードを使用することで、効果を  
高めます。

主要効果：高い保湿効果により、目元の乾燥とカサつきに  
アプローチします。また、コラーゲンの働きを  
サポートし、目元に透明感を与えるといった効  
果が期待できます。

### モルフォ アイセラム 15 ml

主要成分※2：SYN®-AKE ※3、ヘキサペプチド、アセチルヒアルロン酸ナトリウム、  
加水分解ヒアルロン酸など。

使用方法：週に1回、Weekly エイジングケア※モードを使用することで、効果  
を高めます。

主要効果：肌を引き締める3種のペプチドを組み合わせることで、ハリのない  
目元にアプローチすることができます。

#### SYN®-AKE※3

潤いを与える効果がある成分です。  
保湿効果が高く、表情筋をリラックス  
した状態にすることで年齢肌へ働きか  
けます。

#### 加水分解ヒアルロン酸

保湿効果を高め、肌にハリ  
を与えます。



#### 加水分解コラーゲン

肌に浸透しやすい非常に小さな分子で構成  
された成分で、目の周りの肌にハリを与えます。

#### ヘキサペプチド (アセチルヘキサペプチド-8)

肌のコンディションを整えます。

※1「年齢に応じたケア」 ※2「整肌保湿成分」 ※3「ジ酢酸ジペプチドジアミノプロピロイルペンシルアミド」

## 使用方法



①目頭から目尻に向かって5箇所当てます。  
1箇所につき約3秒当て、5回繰り返します。



②目頭から目尻に向かってゆっくりと5回動かします。



③眉頭から眉尻に向かって5箇所当てます。  
1箇所につき約3秒当て、5回繰り返します。



④眉頭から眉尻に向かって5回動かします。

## 毎日のトリートメント

■Dailyモード CMP = 5分 EMP = 5分

- ・CMP:デバイスの素子部分全体に美容液を塗布し、上記の使用手順でケアを行ってください。
- ・EMP:目元部位に美容液を塗布し、上記の使用手順でケアを行ってください。

## 特別な週1回のトリートメント

■weeklyモード = 5分

- ・デバイスの素子部分全体に美容液を塗布し、上記の使用手順でケアを行ってください。
- ・ケアを行う部位へ4つの素子をすべて密着させてください。密着できていない場合、正しく出力されません。

## Dailyモード

- ①モード選択
  - ・Dボタンを長押しすることで、CMPが起動します。
  - ・CMPの状態からDボタンを長押しすることでEMPに切り替わります。
- ②電源OFF
  - ・EMPの状態からDボタンを長押しすることで電源をOFFにします。

## Weeklyモード

- ①モード選択
  - ・Wボタンを長押しすることで、weeklyモードが起動します。
- ②レベル選択
  - ・レベルは3段階あります。Wボタンを押すことで出力レベルを選択できます。
- ③電源OFF
  - ・Wボタンを長押し、またはレベル3の状態再度Wボタンを押すことで電源をOFFにします。



# CHOUCHOU

—チョウチョウ—



# THE RADIANCE KIT

ザ ラディアンス エステキット  
(マスク&ネック)



ハイレベルなケアができるエイジングホーム  
マシン、光トリートメントで「未来肌」へ。

LED治療に特化した医師がアジア人の皮膚を深く研究、肌悩みを解析し開発されました。  
研究解析されたエネルギー密度で照射を行うことで、肌のコンディションを整える働きがあるほか、肌の奥にある筋肉層にまでアプローチすることが可能となり、年齢肌の悩みを改善します。

## 臨床試験で証明された結果

チョウチョウは、世界有数の効能評価機関である SGS と共同で臨床試験を実施し、33名の女性被験者(42~55歳)に、ザ・ラディアンス エステマスクを毎日の朝と夜に使用してもらいました。  
以下のデータは、14日間使用した結果です。


### 検証結果




### ユーザー満足度




### 首のシワ

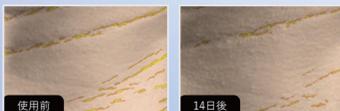

### 肌のハリ

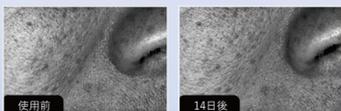

### 毛穴

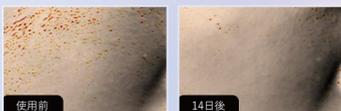

## 光の力

ザ・ラディアンス エステマスクは4つの異なるLEDを採用し、それぞれが皮膚の異なる層をターゲットとし、美容サロンレベルの光量の照射を可能にしました。朝夜用と肌トラブル用の6つのモードで肌の悩みに適したケアが可能となり、青色LED、黄色LED、赤色LED、近赤外線LEDの4種のLED波長を搭載することで、乾燥の防止や毛穴・肌荒れケア、保湿効果など、1台で高い効果を発揮することができます。

近赤外線LED (830nm)

赤色LED (637nm)


黄色LED (583nm)

青色LED (420nm)




## 毎日のデイリーケア

☀️ 朝モード(10分)  
テカリ防止・くすみの予防

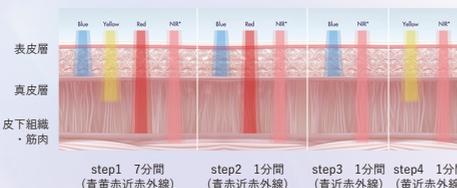

🌙 夜モード(20分)  
深層のコラーゲンに働きかけ、  
肌にハリをもたらす

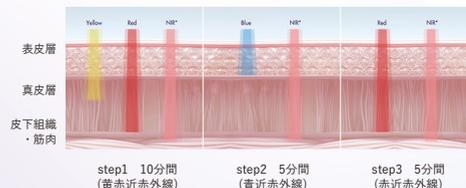

## お肌の悩みに特化したスペシャルケア

<p>ハリ用 肌にハリを与える (20分) 黄・赤・近赤外線</p>	<p>毛穴・皮脂用 テカリ防止 (25分) 青・黄・赤・近赤外線</p>	<p>くすみ用 保湿ケア (20分) 黄・赤</p>	<p>肌荒れ用 肌荒れ防止 (15分) 青・黄・赤・近赤外線</p>
--	--	--	--

# CHOUCHOU

—チョウチョウ—



サロンクオリティのケアをご自宅で



株式会社 CHOUCHOU  
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央 1-11-1  
千葉中央ツインビル 1号館 8F Tel:043-227-8885  
お問い合わせ先 :info@chouohc.jp

# CHOUCHOU

—チョウチョウ—

## The Mesobrush



次世代のエイジングケア  
起こせ、MESO革命。目覚めよ、頭皮。

エイジングケアは頭皮から

メーカー希望小売価格：  
126,500円(税込)

# 頭皮をトータルケア メソスカルプブラシ

サロンで使用される「メソポレーション技術」からの新発想  
頭皮・毛根・毛髪のトリプルケアでボリューム感のある美髪へと導き  
3つのテクノロジーで頭皮と髪健康状態を内から改善します。


## MESOPORATION

イオン導入とエレクトロポレーションを組み合わせたアプローチで美容成分の浸透を促進し、髪の健康を頭皮からケア




## EMS・中低周波

モード別に組まれた独自のプログラムによって44本のソフトシリコンヘッドが頭皮を柔らかく刺激。頭皮の微小循環システムを刺激することで新陳代謝を活性化させ、栄養の供給を促進

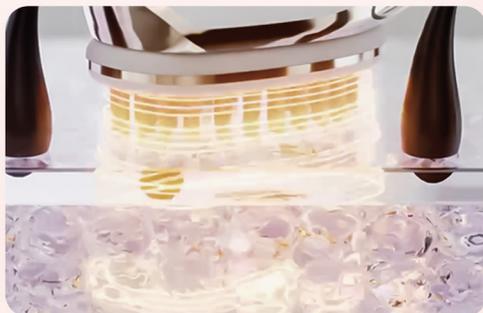

## 美容LED

630nmの赤色LEDと450nmの青色LEDが、頭皮を活性化させることで、毛髪の活力を高め、健康な髪を保つ

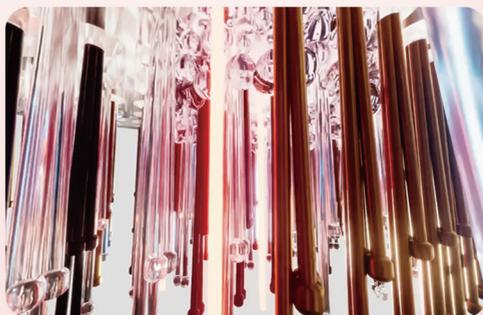

# ヘアケアにアプローチ 美髪ブラシ

油分や静電気を抑え、ボリューム感のあるツヤ髪へ

## 美容LEDで効率的に頭皮ケア


450nm青色LED頭皮の抗菌をサポート  
630nm赤色LED頭皮の血行をサポート

## マイナスイオン効果

マイナスイオンの力で静電気を防止し、艶やかな髪へ

## 頭皮の角度に寄り添う設計

人間工学に基づいた歯列設計と、快適ナイロンブラシで髪の毛を引っ張らず優しくマッサージ

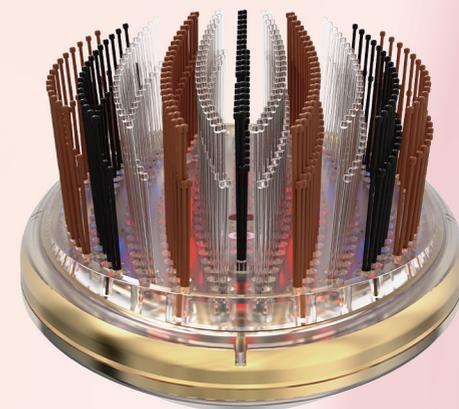

## 美髪ブラシ



before



after

# Meso Scalp Serum

美しい髪は健康な頭皮から  
美容成分を96%以上配合したこだわりの美容液が美しい髪へ導く。



## MESO SCALP SERUMの効果

1. インナードライを徹底ケア
2. ヘアカラーをした頭皮の酸化防止ケア
3. 白髪の予防ケア
4. 頭皮の臭いケア
5. 薄毛、たるみの原因になる紫外線のダメージケア

## 8つのフリー成分

アルコール パラベン シリコン 着色料  
鉱物油 香料 紫外線吸収剤 メントール

素手での塗布に比べ  
頭皮美容液の浸透率は10倍



ボタニカル成分  
16種類配合



シリコン  
配合



フムスエ  
キス配合



フラクセン  
配合



コラーゲン  
配合



セラミド  
配合



\*上海天祥製量技術サービス有限公司 (CRS-2024-264-ZH-01) の試験報告書に基づくデータ (参照: GB/T 40219-2021「ラマン分光計の一般仕様」および実験室内の内部標準方法): MESOBRUSH+MESO Scalp serum サンプルの1時間あたりの浸透率は、通常の使用時の10.15倍であることが確認されました。



## 製品内容

- ・取扱説明書
- ・保存袋
- ・収納ボックス
- ・メソスカルブ セラム2箱(30個)
- ・液噴出ヘッド(2個)
- ・本体
- ・ブラシヘッド1
- ・ブラシヘッド2
- ・液噴出ヘッド
- ・専用充電ACアダプター
- ・専用充電ケーブル

## Mモード(メソスカルプブラシ)

朝起きた後の頭皮マッサージに

EMS

赤色LED



# MESOBRUSHの操作方法

### メソスカルプブラシ

ブラシの毛足を頭皮に一か所3秒を目安に当て、頭皮を前後にこするように動かします。この動作を前頭部、側頭部、後頭部の順に繰り返します。

### 美髪ブラシ

生え際から髪をとかすように後頭部に向かってゆっくり動かして下さい。



※ブラシの毛足全体が、頭皮に垂直に触れるように、ブラシ毛足を垂直に当てて下さい。  
※刺激が強すぎる場合は、お好みのレベルを1、2、3の中からご選択下さい。  
※LEDランプが点灯中は、光を覗いたり、ランプを直視したりしないで下さい。



## Nモード(メソスカルプブラシ)

夜寝る前のリラックスタイムに

EMS

MESOPORATION

赤色LED



## Wモード(メソスカルプブラシ)

週に1回のスペシャルケアに

EMS

MESOPORATION

赤色LED



## 美髪モード(美髪ブラシ)

毎日の美髪ケアに

赤色LED


青色LED

ION



### MESO SCALP SERUMの取付方法

- 1 MESO SCALP SERUMのキャップを開け、液噴出ヘッドに装着。それをMESOBRUSH本体に装着。
- 2 メソスカルプブラシをMESOBRUSH本体に装着。メソスカルプブラシは磁石によりワンタッチでMESOBRUSH本体へ取り付けられる。

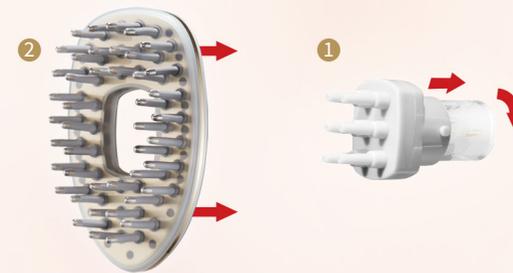

# CHOUCHOU

—チョウチョウ—

サロンクオリティのケアをご自宅で



株式会社CHOUCHOU  
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央1-11-1  
千葉中央ツインビル1号館8F Tel:043-227-8885  
お問い合わせ先:info@chouohc.jp

# CHOUCHOU

—チョウチョウ—

## Mesobrush Solo Care



メーカー希望小売価格：99,000円(税込)

## サロンで使用される 「メソポレーション技術」からの新発想

頭皮・毛根・毛髪のトリプルケアでボリューム感のある美髪へ  
3つのテクノロジーで頭皮と髪健康状態を内から改善します。

### MESOPORATION

イオン導入とエレクトロポレーションを組み合わせたアプローチで美容成分の浸透を促進し、髪健康を頭皮からケア




### EMS・中低周波

モード別に組まれた独自のプログラムによって44本のソフトシリコンヘッドが頭皮を柔らかく刺激。頭皮の微小循環システムを刺激することで新陳代謝を活性化させ、栄養の供給を促進



### 美容LED

630nmの赤色LEDが、頭皮を活性化させることで、毛髪の活力を高め、健康な髪を保つ

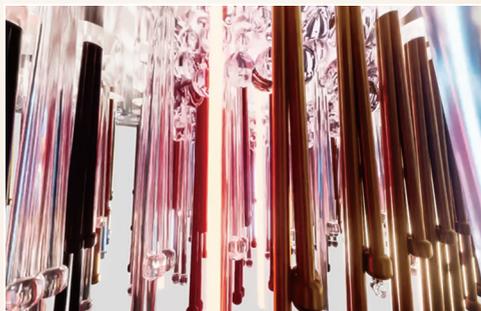

## 毎回5分で効果的なアプローチを実現し、 健康で豊かな髪を育む

### Mモード (メソスカルブブラシ)

朝起きた後の  
頭皮マッサージに

EMS 赤色LED



### Nモード (メソスカルブブラシ)

夜寝る前の  
リラックスタイムに

EMS 赤色LED

MESOPORATION



### Wモード (メソスカルブブラシ)

週に1回の  
スペシャルケアに

EMS 赤色LED

MESOPORATION



## Meso Scalp Serum

美しい髪は健康な頭皮から  
美容成分を96%以上配合したこだわりの美容液が美しい髪へ導く。



ボタニカル成分  
16種類配合



シリコン  
配合



フムスエ  
キス配合



フラーレン  
配合



コラーゲン  
配合



セラミド  
配合

### 8つのフリー成分

アルコール パラベン シリコン 着色料  
鉱物油 香料 紫外線吸収剤 メントール



# CHOUCHOU

—チョウチョウ—

サロンクオリティのケアをご自宅で



株式会社CHOUCHOU  
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央1-11-1  
千葉中央ツインビル1号館8F Tel:043-227-8885  
お問い合わせ先:info@chouohc.jp

# CHOUCHOU

—チョウチョウ—


## IonGlow LED Brush



メーカー希望小売価格：33,000円(税込)

美容LEDで  
効率的に頭皮ケア

マイナスイオンの力で  
静電気を防止し、艶やかな髪へ

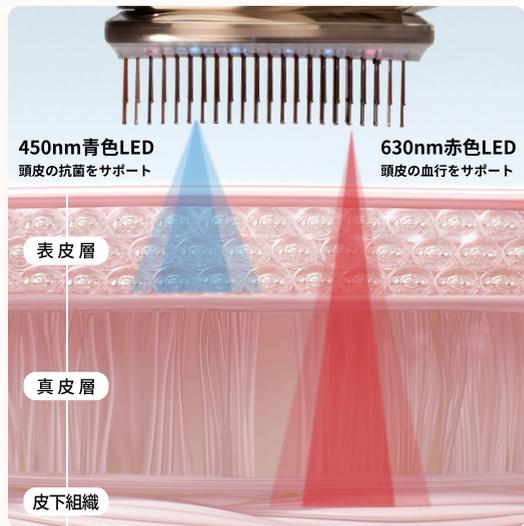

## 美髪ブラシ



before



after

3つのモードを搭載  
ボタン1つで簡単切替

### モード1

スタイリストモード

赤・青LEDで髪の  
トータルサポート




### モード2

ケアモード

赤色LEDで頭皮の  
血行をサポート

<髪の健康UP>

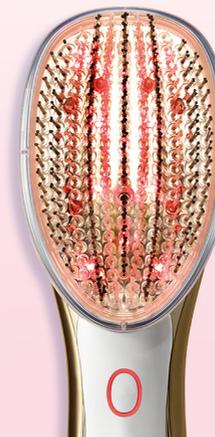

### モード3

クリーンモード

青色LEDで頭皮  
を抗菌サポート

<清潔ケア>

